


Model. BKHM-2445F

# 보 국 마사 지 팟 해 머 사 용 설 명 서

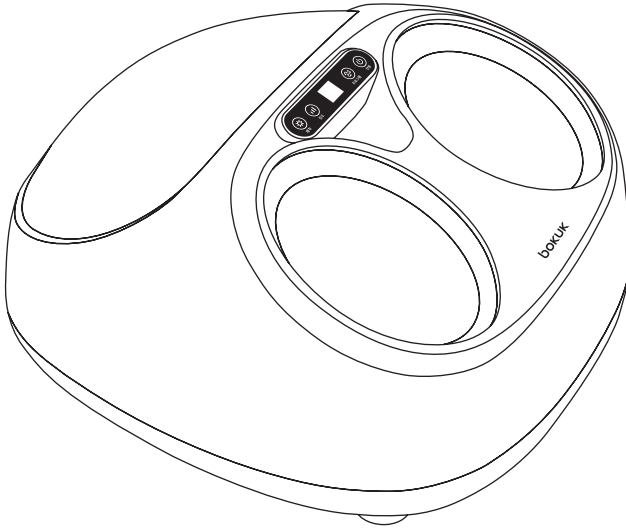

## 주 의 사 항

- 이 제품은 가정용입니다 병원 및 공공장소에서 여러사람이 연속적으로 사용할 경우 모터 과열로 고장의 큰 원인이 됩니다
- 사용 전에 사용설명서를 반드시 읽고, 정확하게 사용하여 주세요
- 사용설명서대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다
- 가전제품 특성상 사용하신 후에는 변심반품이 불가능 합니다

bokuk



# 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다


## ※주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

- ※주의**
1. 이 제품은 가정용으로 제작되었습니다 병원 또는 공공장소에서 여러사람이 연속적으로 사용할 경우 모터과열로 제품 수명이 단축되어 고장의 큰 원인이 됩니다
  2. 제품을 한번에 20분이상 사용하지 마세요 처음 사용할 때에는 근육에 무리가 가지 않도록 5분 이내로 사용하고, 익숙해지면 점차 시간을 늘리시기 바랍니다
  3. 작동이 멈추지 않은 상태에서 일어나거나 전원을 강제로 끄지 마세요
  4. 전원을 끈 후에 반드시 전원 플러그를 빼 주시기 바랍니다
  5. 습기가 있거나 먼지가 많은 환경에서는 제품을 사용하지 마세요
  6. 마사지기에 맨 살이 직접 닿지 않도록 하세요 기기에 직접 닿게 되면 피부에 자극을 줄 수 있습니다
  7. 젖은 상태로 기기를 사용하지 마세요 제품 고장의 원인이 됩니다
  8. 제품 사용 시 신체의 이상을 느끼거나 통증이 오면 사용을 즉시 중단하시기 바랍니다
  9. 아이들이 제품을 가지고 놀거나 기기를 작동하지 못하도록 주의하세요
  10. 제품을 옆으로 세워 놓거나 뒤집어 놓지 마시고 평평한 바닥에서 사용하시기 바랍니다
  11. 제품을 사용하지 않을 때는 발커버에 먼지가 들어가지 않도록 수건 또는 천으로 덮어주세요
  12. 전원선을無理하게 잡아 당기지 마세요
  13. 과열로 인한 화재, 감전의 위험이 있을 수 있으니 제품을 사용하실 때 이불이나 담요 등을 덮지 마세요
  14. 제품에 이상이 생긴 경우, 개인적으로 수리하기 위해 제품을 분해하지 마세요
  15. 제품의 발마사지부 지퍼를 열어두지 마세요 먼지나 이물질이 제품 내부로 들어가 고장의 원인이 됩니다
  16. 다음 사항에 해당되거나 의사의 치료를 받고 있는 경우에는 반드시 의사와 상의해 주세요
    - 1) 임신부 및 어린이
    - 2) 암환자일 경우
    - 3) 심장질환이나 심혈관계에 이상이 있으신 분
    - 4) 만성질환자 또는 중대질병 환자일 경우
    - 5) 신체에 심장 박동기를 달고 계신 분
    - 6) 전자파 영향을 받기 쉬운 의료장비를 사용하고 있는 경우
    - 7) 다리, 발 부위에 통증을 느끼시는 분
    - 8) 정신질환자
  17. 전원 플러그가 손상 되었을 때에는 반드시 사용을 멈추시기 바랍니다
  18. 제품이 작동하지 않거나 파손되었을 때에는 고객센터로 연락하여 주세요
  19. 제품 청소시에는 반드시 전원 플러그를 빼고 마른 헝겊으로 닦아주세요
  20. 제품을 화학성 물질로 청소하지 마세요

## 제 품 특 징

1. 발 부위를 공기압, 지압, 주무름, 롤링 기능으로 마사지 함으로써 편안한 안마효과를 느낄 수 있습니다
2. 발의 굴곡을 생각한 3D입체 안마방식을 이용해 발바닥과 발등을 시원하고, 꼼꼼하게 마사지 받을 수 있습니다
3. 보기편한 LED 표시램프 방식으로 마사지의 상태조절과 진행상황을 더욱 쉽게 확인할 수 있습니다
4. 사용시간 15분이 지나면 자동으로 전원이 차단되어 과도한 사용으로 인한 신체의 무리등을 방지할 수 있습니다
5. 에어셀 방식의 3D입체 공기압 마사지 기능을 추가하여 손지압 느낌 그대로의 시원함을 느낄 수 있습니다
6. 리모컨으로 허리를 굽히지 않고 간편하게 버튼을 조작할 수 있어 편하게 마사지를 받을 수 있습니다
7. 세탁 가능한 탈착식 커버로 항상 청결하고 위생적으로 온 가족이 이용하실 수 있습니다
8. 어댑터 사용방식으로 사용 후 선정리를 할 수 있어 깔끔하게 보관하실 수 있습니다

## 제 품 사 양 및 각 부 명 칭

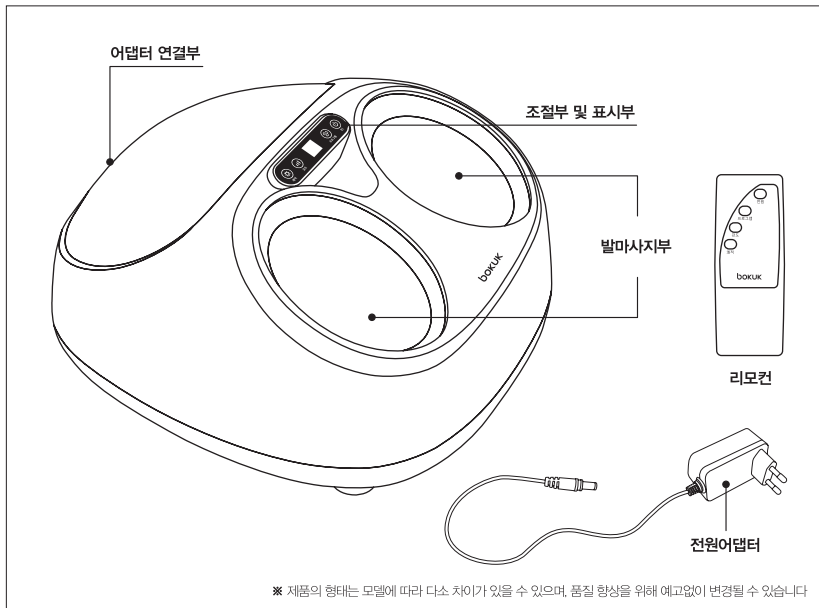

<b>모델명</b>	BKHM-2445F	<b>외형치수</b>	370X410X195(mm)
<b>정격전압</b>	DC 24V, 2.0A, 50~60Hz	<b>소비전력</b>	45W
<b>중량</b>	3.8kg	<b>작동시간</b>	15분(1회)

# 조 절 부 및 표 시 부



## 패적

전원을 켜면 제품 안에 내장된 적외선 램프가 자동으로 작동합니다. 적외선은 탈취의 기능이 있어 기기 내부 공간에 쾌적한 환경을 제공해 줍니다. 패적버튼을 누르면 적외선 램프를 끄거나 켤 수 있습니다. (LED창에 작동 시 H1, 작동 멈춤 시 HF로 표시)



## 강도

3단계로 조절이 가능하며 강도 버튼을 순차적으로 누르면 모드가 변경됩니다. (LED창에 L1/L2/L3로 표시)

※ 강도세기 : L1 < L2 < L3



## 프로그램

총 4단계의 프로그램 모드이며, 모드 버튼을 순차적으로 누르면 모드가 변경됩니다. (LED창에 P1/P2/P3/P4로 표시)

- P1 : 공기압+롤러 마사지 / 26초 작동 후 1초 정지 (강도조절 가능)
- P2 : 공기압+롤러 마사지 / 14초 작동 후 1초 정지 (강도조절 가능)
- P3 : 롤러 마사지 / 발바닥 마사지 (강도조절 불가)
- P4 : 공기압 마사지 / 발등 마사지 (강도조절 가능)



## 전원

전원을 켜면 프로그램(P1) 강도(L1) 기능이 기본으로 설정되어 작동합니다.

# 제 품 사 용 방 법

1. 전원 플러그를 콘센트에 꽂으시면 LED창에 "OF"가 표시됩니다
2. 의자에 앉아 편안한 자세로 두발을 발마사지부에 넣습니다
3. 전원버튼을 눌러 마사지를 시작합니다. (전원버튼을 누르면 LED창에 기본설정시간 15분인 "15"가 표시됩니다)
5. 전원을 켜면 제품내부에 내장되어 있는 적외선 램프가 자동으로 작동하며 적외선 램프를 끄고 싶으면 패적 버튼을 누르시면 됩니다. (적외선 램프는 제품 속에 내장되어 있어 외부에서는 불빛이 잘 보이지 않습니다)
6. 프로그램을 다양하게 즐기고 싶다면 모드를 순차적으로 누르시면 됩니다
7. 강도버튼을 누르면 필요에 따라 3단계 마사지 강도조절을 할 수 있습니다
8. 사용시간은 15분이며 15분이 지나면 자동으로 전원이 차단됩니다
9. 작동중 전원버튼을 누르면 모든 기능이 정지됩니다
10. 사용 종료 후에는 반드시 전원 플러그를 빼주시기 바랍니다

# 고 장 신 고 전

## 확 인 사 항

\* 아래와 같이 점검 후에도 이상이 있을 때는 제품 사용을 멈추고 당사 고객센터(031-901-4461)로 문의 하십시오

증상	확인 및 조치
기계가 작동하지 않아요!	제품과 전원 연결선을 확인하세요 전원 플러그가 꽂혀있는지 확인하세요 전원버튼이 켜져 있는지 확인하세요
기계가 갑자기 작동을 멈춰요!	전원이 꺼져 있는지 확인하세요 전원 플러그가 빠져있는지 확인하세요 인마시간 15분이 넘으면 자동으로 꺼집니다

# 품 질

## 보 증 서

제품명	보국 마사지 풋해머		모델명	BKHM-2445F	
구매일자	년	월	일	제품보증기간	1년
고객성명		전화		주소	
구매처		전화		주소	

\* 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다

1. 제품 보증기간은 구입일로부터 1년입니다
2. 사용설명서 주의에 따른 정상적인 사용상태에서 고장이 난 경우, 구입장소 또는 본사 서비스센터에서 1년간 A/S 해드립니다
3. 보증기간 일지라도 아래와 같은 경우 A/S 비용이 발생합니다
  - 사용자의 취급부주의에 따른 고장
  - 천재지변에 의한 고장
  - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
  - 구매 후 이동 또는 낙하 등 사용중에 생긴 파손 및 고장
  - 소모품 및 부속품 교환
  - 설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 생긴 고장
4. A/S 요청시 보증서를 첨부한 제품을 당사에 택배로 접수하여 서비스해 드립니다
5. 본 증서는 국내에서만 유효합니다



\* 저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

**A/S 및 제품문의 : (주)팔코나인**

031-901-4461 / 경기도 고양시 덕양구 원흥동704, 고양아크비즈 1213호

**판매원**

(주)다원스토리